



Dra. Diocelina Viruette Pontigo  
Patóloga - Citopatóloga



## SUCURSALES

### Tuxtla

6a norte poniente #720-A  
(entre 6a y 7a poniente)  
Col. Centro.

✓ 961 611 1755 / 961 600 0093

☎ 961 241 0968

> [sedetuxtla@lpalaboratorios.com](mailto:sedetuxtla@lpalaboratorios.com)

### San Cristóbal

Calz. Manuel Velasco Suárez  
#3 Col. La Isla

✓ 967 116 0827

☎ 967 136 3088

> [sedesancris@lpalaboratorios.com](mailto:sedesancris@lpalaboratorios.com)

### Villaflores

1a oriente entre 2a y 3a sur  
Col. Centro.

✓ 965 652 1905

☎ 965 100 5722

> [sedevillaflores@lpalaboratorios.com](mailto:sedevillaflores@lpalaboratorios.com)

### Comitán

5a sur oriente #37  
esq. Con 4a oriente sur  
Barrio San Agustín

✓ 963 688 6319

☎ 963 330 4346

> [sedecomitan@lpalaboratorios.com](mailto:sedecomitan@lpalaboratorios.com)

## OFICINA CENTRAL

Avenida Presa Cecilio del Valle 110. Colonia Las Palmas  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

[LPALABORATORIOS.COM](http://LPALABORATORIOS.COM)

INSTRUCTIVO PARA

# TOMA DE MUESTRA CON BROCHA COLPOTRE (CO-TESTING)

KIT PARA CO-TESTING BASE LÍQUIDA PCR

VP  
28



**RESPONSABLE SANITARIO** Dra. Diocelina Viruette Pontigo – Especialista en Anatomía Patológica  
Universidad Nacional Autónoma de México. Recertificada por el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos A.C.  
Cédula Profesional 3604708 / Cédula de especialidad 4452884


[LaboratoriosLPA](https://www.instagram.com/LaboratoriosLPA)

# TOMA DE MUESTRA CON BROCHA COLPOTRE (CO-TESTING)

KIT PARA CO-TESTING BASE LÍQUIDA PCR



1. Coloque un espejo vaginal amplio con longitud de 12 cm. para una adecuada observación del cuello del útero.

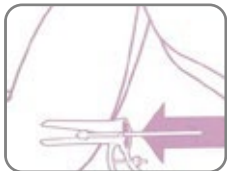

2. Introduzca cuidadosamente el cepillo hacia la parte central del cuello uterino.



3- Continúe introduciendo el cepillo hasta que las cerdas del centro toquen el endocervix y las cerdas de los extremos hagan contacto sobre el epitelio de la zona de transformación, sitio donde se genera la infección por el VPH.



4- Gire cuidadosamente aplicando una ligera presión para que las cerdas tengan mayor contacto con el epitelio del endocervix y el ectocervix. Expertos recomiendan girar de 3 a 5 veces en una sola dirección.



5- Introduzca la porción blanca del cepillo en la solución provista.

VPH  
28

MÉTODO DE DETECCIÓN Y TIPIFICACIÓN:  
PCR MÚLTIPLE ANYPLEX II PARA VPH 28.

Las muestras negativas en este proceso se exploran con PCR universal y se tipifican por secuenciación.

Se investigaron los virus: Anyplex II:

## ALTO RIESGO

## BAJO RIESGO

16	18	26	6	11	40
31	33	35	42	43	44
39	45	51	54	61	70
52	53	56			
58	59	66			
68	69	73			
	82				

Controles utilizados: Control negativo de PCR y controles positivos para VPH.  
Control interno (IC) positivo del gen de la beta globina humana (HBB).

CONTÁCTAME

