



Dra. Diocelina Viruette Pontigo
Patóloga - Citopatóloga



SUCURSALES

Tuxtla

6a norte poniente #720-A
(entre 6a y 7a poniente)
Col. Centro.

V 961 611 1755 / 961 600 0093

N 961 241 0968

> sedetuxtla@lpalaboratorios.com

San Cristóbal

Calz. Manuel Velasco Suárez
#3 Col. La Isla

V 967 116 0827

N 967 136 3088

> sedesanctis@lpalaboratorios.com

Villaflores

1a oriente entre 2a y 3a sur
Col. Centro.

V 965 652 1905

N 965 100 5722

> sedevillaflores@lpalaboratorios.com

Comitán

5a sur oriente #37
esq. Con 4a oriente sur
Barrio San Agustín

V 963 688 6319

N 963 330 4346

> sedecomitan@lpalaboratorios.com

OFICINA CENTRAL

Avenida Presa Cecilio del Valle 110. Colonia Las Palmas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

LPALABORATORIOS.COM

RESPONSABLE SANITARIO Dra. Diocelina Viruette Pontigo - Especialista en Anatomía Patológica
Universidad Nacional Autónoma de México. Recertificada por el Consejo Mexicano de Médicos Anatómopatólogos A.C.
Cédula Profesional 3604708 / Cédula de especialidad 4452884

INSTRUCTIVO PARA
**TOMA DE MUESTRA EN
ENDOCÉRVIX Y EXOCÉRVIX**
PARA VPH EN PCR

VP
28


f Instagram LaboratoriosLPA



TOMA DE MUESTRA EN ENDOCÉRVIX Y EXOCÉRVIX

PARA VPH EN PCR

1. Introducir el espejo vaginal y ubicar el cuello del cérvix

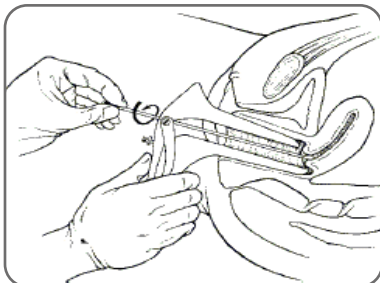

2. En caso de flujo abundante, limpiarlo con una gasa limpia.

3. Introducir el cepillo en el cuello del cérvix y girarlo de 3 a 4 veces.



4. En caso de que presente lesión, tomar muestra en la zona con el mismo cepillo.

5. Sacar el cepillo y colocarlo en el tubo con solución preservadora de células.

Cerrar y etiquetarlo.

6. Retirar el espejo vaginal y desechar en RPBI.

7. El cepillo de cada muestra deberá colocarse en un tubo con solución preservadora de células, cortándolo sobre el doblez predeterminado.



LPALABORATORIOS.COM

PANEL LARGO PCR

**MÉTODO DE DETECCIÓN Y TIPIFICACIÓN:
PCR MÚLTIPLE ANYPLEX II PARA VPH 28.**
**VP
28**

Las muestras negativas en este proceso se exploran con PCR universal
y se tipifican por secuenciación.

Se investigaron los virus: Anyplex II:

ALTO RIESGO

16	18	26
31	33	35
39	45	51
52	53	56
58	59	66
68	69	73
82		

BAJO RIESGO

6	11	40
42	43	44
54	61	70

Controles utilizados: Control negativo de PCR y controles positivos para VPH.

Control interno (IC) positivo del gen de la beta globina humana (HBB).

CONTÁCTAME

